


The logo for the brand 'TRIXIE' is displayed in a stylized, bold, white font with a thick black outline. The letters are set against a red, rounded rectangular background that has a slight 3D effect with a white highlight on the top left.

SAFECARD

Zecken- Entferner




Hemmt die
Übertragung
gefährlicher
Erreger



Tick Remover · Enlève-tiques
Rimuovi zecche · Tekenverwijderaar
Fästingborttagare · Flåtfjerner

#2299

TRIXIE

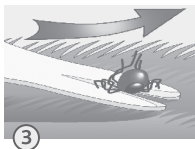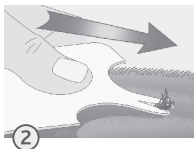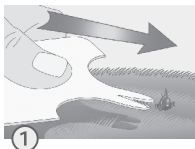

DE Zecken-Entferner

- hemmt die Übertragung gefährlicher Erreger
- kleine Zusatzklemme eignet sich zum Entfernen von Stacheln und Splintern
- Kunststoff

Gebrauchsanweisung: Streichen Sie das Fell rund um die Zecke beiseite. Bewegen Sie die Karte auf der Haut des Tieres in Richtung Zecke. Führen Sie den Entferner zwischen Haut und Zeckenrumpf bis die Zecke fest in der Klemme fixiert ist. Führen Sie die streichende Bewegung in einer Vorwärts-Aufwärts-Richtung fort. Ziehen Sie dabei die Zecke mit einer ruhigen, gleitenden Bewegung aus der Haut. Falls sich die Zecke nicht komplett entfernen lässt, suchen Sie bitte einen Tierarzt auf.

EN Tick Remover

- inhibits the transmission of dangerous pathogens
- small clip for removing spikes and splinters
- plastic

Instructions for use: Brush away the coat around the tick. Move the card on the pet's skin toward the tick. Now put the tick remover between the pet's skin and the tick's torso until the tick is fixed in the clip. Continue with the gliding movement in the forward and upward direction. Extricate the tick from the pet's skin by a calm and sliding movement. If there should be any remains of the tick please contact your veterinarian.

FR Enlève-tiques

- réduit le risque de transmission d'infections graves
- petit clip pour enlever pointes et échardes
- en plastique

Conseils d'utilisation : écartez le poil tout autour du tique. Mettez la carte sur la peau en direction du tique. Placez la carte pour enlever le tique entre la peau et le tronc jusqu' à ce que le tique soit fixé dans la pince. Continuez le mouvement avant et vers le haut tout en tirant le tique de la peau avec un mouvement calme et glissant. Si vous ne pouvez pas enlever les tiques en totalité, veuillez consulter un vétérinaire.

IT Rimuovi zecche

- si previene la trasmissione di malattie
- la piccola fessura è specifica per rimuovere spine e schegge
- in plastica

Istruzioni per l'uso: Togliere il pelo attorno alla zecca. Posizionare la carta sulla pelle dell'animale attorno alla testa della zecca. Successivamente collocarla la pinza tra la pelle ed il corpo della zecca e bloccarla. Continuare a ruotare fermamente la pinza in senso orario o antiorario finché la zecca non si stacca. Estrarre la zecca dalla superficie cutanea con movimenti tranquilli e continui. Se la zecca persiste a rimanere, contattare immediatamente il vostro veterinario.

NL Tekenverwijderaar

- voorkomt besmetting met gevaarlijke ziektekiemen
- kleine extra voorziening voor het verwijderen van stekels en splinters
- kunststof

Gebbruiksaanwijzing: Strijk het vacht rondom de teek opzij. Strijk u de kaart op de huid van het dier in de richting van de teek. Voert u de verwijderaar tussen huid en de tekenromp tot de teek goed in de klem vastzit. Gaat u door met de strijkende beweging in een voorwaarts-opwaartse richting. Trek daarbij de teek met een rustige, glijdende beweging uit de huid. In het geval de teek zich niet geheel laat verwijderen, consulteert u alstublieft een dierenarts.

SV Fästingborttagare

- hämmar överföring av farliga ämnen
- små infasningar för att ta bort taggar och flisor
- plast

Användarinstruktioner: Borsta bort pälsen runt fästingen. Dra kortet efter djurets hud mot fästingen. Placera nu fästingborttagaren mellan djurets hud och fästingens överkropp tills fästingen är fixerad i klämman. Fortsätt med glid rörelsen i riktning framåt och uppåt. Avlägsna fästingen från djurets hud genom en lugn och glidande rörelse. Om det finns kvar några rester från fästingen, kontakta din veterinär.

ES Tarjeta Quita Garrapatas

- previene la transmisión de enfermedades peligrosas
- pequeño clip para extraer picos o astillas
- plástico

Instrucciones de uso: Cepille el pelo alrededor de la garrapata. Mueva la tarjeta sobre la piel de la mascota hacia la garrapata. Ahora coloque el quita garrapatas entre la piel de la mascota y el torso de la garrapata hasta que la garrapata se fije en el clip. Continúe con el movimiento de deslizamiento hacia adelante y hacia arriba. Saque la garrapata de la piel de la mascota con un movimiento tranquilo y deslizante. Si hubiera restos de la garrapata, contacte con su veterinario.



70950

Made in China



#2299

Patent-Nr.
(WO 03/02294 A1)

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32
24963 Tarp · GERMANY
www.trixie.de