


TRIXIE

Zeckenzange

Zum mühelosen
Entfernen von Zecken

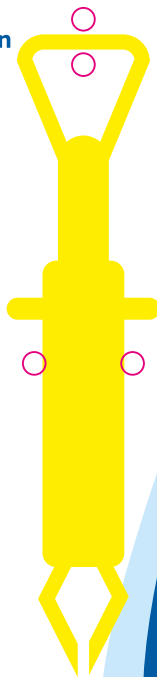

Tick Tweezers
Pince
anti-tiques
Pinzetta
per zecche
Tekentang
Fästingpincett
Pinzas Quita
Garrapatas
#2386

TRIXIE

DE Zeckenzange

- zum mühelosen Entfernen von Zecken
 - Metall mit Kunststoffummantelung
- Gebrauchsanweisung:** Drücken Sie die Feder, um die Greifer der Zange zu öffnen. Streichen Sie das Fell rund um die Zecke beiseite. Dann fassen Sie die Zecke so dicht wie möglich an der Einstichstelle mit den Greifern. Ziehen Sie sie vorsichtig, aber zügig und möglichst gerade heraus. Die Hautpartie sollte nach der Entfernung gründlich desinfiziert werden. Falls sich die Zecke nicht komplett entfernen lässt, suchen Sie bitte einen Tierarzt auf.

EN Tick Tweezers

- for an easy removal of ticks
 - metal with plastic coating
- Instructions for Use:** Press the spring to open the grippers of the tweezer. Move away the fur around the tick. Then grip the tick with the grippers as closely to the skin as possible. Pull the tick out carefully, but without hesitating and straight upward if possible. The bite area should be disinfected thoroughly after that. If you cannot remove the tick whole, please consult a vet.

FR Pince anti-tiques

- pour enlever facilement les tiques
 - en métal revêtement plastique
- Conseils d'utilisation :** appuyez sur la boucle afin d'ouvrir les machoires de la pince. Écartez les poils autour de la tique. Puis attrapez la tique avec les machoires de la pince aussi près que possible de la peau. Retirez la tique avec précaution, mais sans hésitation et d'un seul coup si possible. La surface cutanée traitée doit être rapidement désinfectée. Si la tique persiste à rester, contactez immédiatement votre vétérinaire.

IT Pinzetta per zecche

- per rimuovere facilmente le zecche
 - in metallo con impugnatura in plastica
- Istruzioni per l'uso:** premere la molla per aprire le punte della pinzetta. Spostare il pelo attorno alla zecca. Cercare di afferrare la zecca il più vicino possibile alla pelle. Estrarre con attenzione la zecca, ma senza esitazione, con mano ferma e dritta verso l'alto. La superficie cutanea interessata dovrà essere rapidamente disinfettata. Se la zecca persiste a rimanere, contattare immediatamente il vostro veterinario.

NL Tekentang

- voor het eenvoudig verwijderen van teken
 - metaal met kunststof coating
- Gebruiksaanwijzing:** Druk op de veer, om de grijper van de tang te openen. Strijk het vacht rondom de teek opzij. Dan pakt u de teek zo dicht mogelijk bij de plek waarin hij steekt met de grijper. Trekt u hem er voorzichtig, doch snel en zo mogelijk recht uit. De huid dient na de verwijdering grondig gedesinfecteerd te worden. In het geval de teek zich niet geheel laat verwijderen, consulteert u alstublieft een dierenarts.

SV Fästingpincett

- för enkel fästingborttagning
 - metall med hölje av plast
- Användarinstruktioner:** Tryck ihop fjäderför att öppna pincetten. Flytta undan pälsen runt fästingen. Grip sedan tag med pincetten i fästingen så nära huden som möjligt. Dra försiktigt ut fästingen, men utan att tveka och uppåt om möjligt. Bettet och området runt om måste desinficeras efter att fästingen avlägsnats. Om det finns kvar några rester från fästingen, kontakta din veterinär.

DA Flåttang

- til nem fjernelse af flåter
 - metal med plastovertræk
- Brugsvejledning:** Præs fjederen ned, for at åbne tangens næb. Stryg pelsen rundt om flåten til side. Herefter tager du vha. tangens næb fat om flåten - så tæt på bidestedet som muligt. Fjern flåten forsigtigt, men hurtigt. Efterfølgende bør huden i området desinficeres grundigt. Hvis flåten ikke kan fjernes helt, bør du opsøge en dyrlæge.

ES Pinzas Quita Garrapatas

- para quitar fácilmente las garrapatas
 - metal con cubierta de plástico
- Indicaciones de Uso:** Presione el muelle para abrir las pinzas. Retire el pelaje de alrededor de la garrapata. Luego agarre la garrapata con las pinzas lo más cerca posible de la piel. Tire de la garrapata con cuidado, pero sin dudar y hacia arriba si es posible. El área de la picadura debe desinfectarse completamente después de esto. Si no puede eliminar la garrapata entera, consulte a un veterinario.

PT Pinça para Carraças

- para remoção de carraças
 - metal com revestimento em plástico
- Instruções para utilização:** Pressionar a mola para assim abrir as pinças. Afastar o pêlo em volta da carraça. Agarrar a carraça com as pinças o mais perto da pele possível. Retirar a carraça cuidadosamente, mas sem hesitar e puxando directamente para cima se possível. A área da mordedura deve ser desinfectada cuidadosamente. Se não conseguir retirar a carraça na sua totalidade, por favor consulte o seu veterinário.

PL Szczypce do usuwania kleszczy

- Do łatwego usuwania kleszczy
 - Z metalu z plastikowym pokryciem
- Instrukcja użytkowania:** Naciśnij sprężynę, aby otworzyć chwytaki pesety. Odsuń sierść wokół kleszcza. Następnie chwyc kleszcza chwytakami jak najbliżej skóry. Wyciągnij kleszcza ostrożnie, ale bez wahania i jeśli to możliwe, prosto w górę. Następnie obszar ukąszenia należy dokładnie zdezynfekować. Jeśli nie możesz usunąć kleszcza w całości, skontaktuj się z weterynarzem.

CS Pinzeta na klíšata

- pro snadné odstranění klíšat
 - kov s plastovým povrchem
- Návod k použití:** Stisknutím pružiny otevřete chapadla pinzety. Odsuňte srst kolem klíšat. Potom uchopte klíšatě pomocí chapadel co nejlíže ke kůži. Opatrně vytáhněte klíšatě ven, bez váhání a pokud možno rovně nahoru. Po kousnutí je třeba kůži důkladně dezinfikovat. Pokud nemůžete odstranit klíšatě celé, obraťte se na veterináře.

RU Пинцет для извлечения клещей

- для удобного извлечения клещей
 - металл с пластиковым покрытием
- Инструкция по эксплуатации:** Нажмите на пружину, чтобы открыть пинцет для захвата. Раздвиньте шерсть вокруг клеща и ухватите его пинцетом как можно ближе к коже. Осторожно, но без колебаний потяните клеща вверх. После удаления клеща тщательно продезинфицируйте место укуса. Если не удалось извлечь клеща целиком, обратитесь к ветеринарному врачу.



72770

Made in China



#2386

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32
24963 Tarp · GERMANY
www.trixie.de